

Gebrauchsanweisung



 **SANIDA**
sichert. stärkt. schützt.




COMFORT Ellenbogenbandage Plus
COMFORT Elbow Support Plus


REF 141 720 NET

ILLUSTRATIONEN FIGURES

1

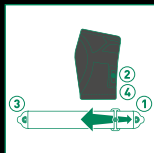

2

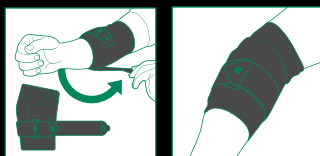

SPRACHEN LANGUAGES

DE	Deutsch	Gebrauchsanweisung	03
EN	English	Instructions for use	07

Vielen Dank für das Vertrauen in dieses Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

ZWECKBESTIMMUNG

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um eine zirkulär komprimierende Ellenbogen-Kompressionsbandage mit Pelotten aus elastischem Gewebe, mit elastischen Profilpolstern.

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, wie z. B. Epicondylitis, Tendomyopathie.

KONTRAINDIKATIONEN

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie.

ANWENDUNGSRISIKEN / WICHTIGE HINWEISE

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab.

Die Auswahl der geeigneten Größe und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- Medizinprodukt vor radiologischen Untersuchungen ablegen
- bei längeren Ruhephasen ablegen z. B. beim Schlafen
- bei Taubheitsgefühl Medizinprodukt lockern oder ggf. abnehmen
- bei anhaltenden Beschwerden den Arzt oder Fachhandel aufsuchen
- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen

- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht auf offenen Wunden tragen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung von nur einem Patienten bestimmt
- während der Tragedauer der Bandage: keine lokale Anwendung von Cremes oder Salben im Bereich des angelegten Hilfsmittels – kann Material zerstören

ANZIEHANLEITUNG

1 Stabilo-Band mit easyClick-System zur individuellen Dosierung des Pelottendrucks: ① und ③ Einhänge-Modul, ② Träger-Modul, ④ Verstell-Modul.

Passen Sie die Dosierung des Pelottendrucks durch Verschieben des Verstell-Moduls ④ individuell an.

2 Bei Erhalt Ihrer Bandage ist das Einhänge-Modul ① des Stabilo-Bandes im Träger-Modul ② auf der Bandage eingehängt. Führen Sie das Stabilo-Band unter leichtem Zug zirkulär um den Unterarm. Schließen Sie das Band durch Einhängen des freien Einhänge-Moduls ③ am Verstell-Modul ④. Achten Sie auf einen festen und gleichzeitig angenehmen Sitz des Stabilo-Bandes. Wird das Stabilo-Band mit easyClick-System nicht benötigt, kann das Träger-Modul ② aus der Velours-Tasche entnommen werden.

ABLEGEN

Nach dem Öffnen des Stabilo-Bandes greifen Sie den unteren Rand der Bandage und streifen die Bandage über den Unterarm Richtung Hand ab.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG



Elastodien/Latex (LA), Polyamid (PA), Viskose (CV), Elasthan (EL)


Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem eingenähten Textiletikett.





Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

REINIGUNGSHINWEISE

 Schonwaschgang 30 °C  Nicht bleichen

 Nicht im Wäschetrockner trocknen

 Nicht bügeln  Nicht chemisch reinigen

Keinen Weichspüler verwenden. In Form ziehen und an der Luft trocknen.

GEWÄHRLEISTUNG

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

NUTZUNGSDAUER / LEBENSDAUER DES PRODUKTS

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßigem Umgang bestimmt.



MELDEPFLICHT

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder uns als Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

Die Kontaktdaten des Herstellers entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der zuständigen nationalen Behörde Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link:

www.bort.com/md-eu-kontakt.



ENTSORGUNG

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES entspricht.

Stand: 02.2024

 Medizinprodukt |  Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

Many thanks for placing your trust in this medical device. Please read the existing instructions for use carefully. If you have any questions, please refer to your physician or the specialist retailer from whom you purchased this medical device.

INTENDED PURPOSE

This medical device is a circumferential compression elbow compression support with elastic material fabric pads and elastic profile pads.

INDICATIONS

Chronic, post-traumatic or post-operative soft tissue irritation in the elbow joint area, e.g. epicondylitis, tendomyopathy.

CONTRAINDICATIONS

Peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymph drainage disorders, also unclear soft tissue swellings distal to the aid positioned, sensory and circulatory disorders with the region of the body treated, skin diseases in the part of the body treated, latex allergy.

APPLICATION RISKS / IMPORTANT NOTES 

This medical device is a prescribable product. Discuss the use and duration with your treating physician. The expert staff from whom you have received the medical device will select the appropriate size and instruct you regarding its use.

- remove the medical device prior to radiological examinations
- remove it during longer periods of rest, e. g. when sleeping
- in case of numbness, loosen the medical device and remove it if necessary
- in case of persistent complaints, consult the physician or specialist retailer
- use the medical device in accordance with therapeutic needs
- only use other products simultaneously after consultation with your physician
- do not make any changes to the product
- do not wear it on open wounds
- do not use in case of intolerance of one of the materials used
- no re-use. This medical aid is intended for treating one patient only
- whilst wearing the support, please neither use any creams nor ointments on or around it as they can destroy the material

FITTING INSTRUCTIONS

1 Stabilo strap with the easyClick system for individual dosage of the pad pressure: ① and ③ attachment module, ② supporting module, ④ adjustment module.

Adapt the pad pressure dosage individually by moving the adjustment module ④.

2 When you receive your support, the attachment Stabilo strap module ① in the supporting module ② is attached on the support. Guide the Stabilo strap circumferentially around the lower arm under slight tension.

Close the strap by attaching the free attachment module ③ to the adjustment module ④. Pay attention to firm and at the same time comfortable fitting of the Stabilo strap.

If the Stabilo strap with the easyClick system is not needed, the supporting module ② can be taken from the velour bag.

REMOVAL

After opening the Stabilo strap, take hold of the lower edge of the support and slip the support over the lower arm in the direction of the hand.



MATERIAL COMPOSITION

Elastodiene/latex (LA), polyamide (PA), viscose (CV), elastane (EL)
The sewn in textile label provides the precise material composition.



The product contains latex and can trigger allergic reactions.

CLEANING INFORMATION

Delicate wash 30 °C Do not bleach

Do not dry in a tumble dryer Do not iron

Do not clean chemically

Do not use fabric conditioner. Stretch back into shape and dry in the fresh air.

GUARANTEE

The legal regulations of the country in which you acquired the product apply to the purchased product. Please contact your specialist retailer if you suspect a warranty claim. Please clean the product before submitting a warranty claim. If the enclosed instructions for use have not been properly observed, the warranty may be impaired or cancelled. The warranty does not cover use of the product inappropriate for the indication, non-observance of application risks, instructions and unauthorised modifications to the product.

USEFUL LIFE / LIFETIME OF THE PRODUCT

The lifetime of the medical device is determined by its natural wear and tear if treated appropriately and as recommended.

DUTY OF NOTIFICATION

If a serious worsening of the state of health occurs when using the medical device, you are obliged to notify the specialist dealer or us as the manufacturer and the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). You can find the manufacturer's contact data in these instructions for use. You can find the contact information for the national authority responsible for your country under the following link:
www.bort.com/md-eu-contact.


DISPOSAL

Upon the termination of use, the product must be disposed of in accordance with the corresponding local requirements.

DECLARATION OF CONFORMITY

We confirm that this device conforms with the requirements of REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.

Status: 02.2024

MD Medical device |  Single patient – multiple use

Gebrauchsanweisung



 **SANIDA**
sichert. stärkt. schützt.

Made in

Germany



PDF: www.sanida.info

 **COMFORT
GreenLine**

Vertrieb durch / distributed by:

NetworCare GmbH

Goethestraße 5-7

09119 Chemnitz

Germany

Tel. 09421 8007 480

www.sanida.info



BORT GmbH
Am Schweizerbach 1
D-71384 Weinstadt
www.bort.com

